

胰島素注射筆介紹與使用步驟

速效型




愛胰達注射筆




諾和瑞諾易筆

混合型

※使用前請搖勻

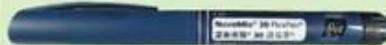

諾和密斯 30諾易筆

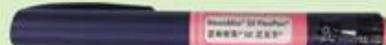

諾和密斯 50諾易筆

長效型



瑞和密爾諾易筆



蘭德仕注射筆



糖德仕注射筆

1



洗手後將酒精棉片及針頭、胰島素準備好

6



第一次注射，請轉2個單位做排氣測試

2



混合型注射筆請使用前搖勻至少20下

7



排氣完畢後，將劑量設定鈕轉至處方劑量

3



打開酒精棉片，消毒注射筆頂端橡皮膜

8



酒精棉消毒注射部位，注射時，按壓注射鈕至數字歸"0"並停5-10秒後拔出注射筆
勿搓揉注射部位

4



撕開針頭上針頭保護片

9



注射完畢，將針頭外蓋套回後將針頭逆時針轉出

5



A. 插入針頭，並順時針旋轉到底
B. 拔除針頭外蓋
C. 拔除保護內蓋

10



拔掉的針頭丟置醫療廢棄回收桶。回診時拿至門診治療室回收

